

操作手順書

バッテリーの充電について


(電動昇降式ストレッチャー **ST-380,380S** 用)
(高さ調節式担架付ストレッチャー **LV-140** 用)

本操作手順書は、取扱説明書の一部を抜粋した簡易的なものです。本製品をさらに安全に正しく使用していただくために、取扱説明書を良く読んで操作を十分熟知され、各注意事項を厳守しながらご使用願います。

- 一日の入浴作業が終わりましたら、必ずバッテリーの充電を行なってください。
- 作業中にアラームが鳴ったときは、バッテリーの容量が少なくなっていますので、ストレッチャーの使用をやめ、下記の方法で充電を行ってください。
アラーム後も使用し続けるとバッテリーの寿命が短くなります。

充電の方法

- 1 バッテリー部の水気を拭き取ります。特にコネクタキャップ付近の水気を十分に拭き取ります。
- 2 充電器の電源プラグを AC100V コンセントに差し込みます。
- 3 コネクタキャップを外し、充電用プラグを接続します。
- 4 電源スイッチを ON にしてください。POWER ランプが点灯し、充電が始まります。
- 5 充電が進行すると、CHARGE UP ランプが点灯します。
- 6 充電が完了すると、POWER ランプが消灯しますので、電源スイッチを OFF にします。
※ 5 の CHARGE UP ランプが点灯してから満充電までは約 5 時間です。
- 7 充電用プラグを外し、バッテリーのコネクタにコネクタキャップを取り付けます。
次に電源プラグをコンセントから抜きます。

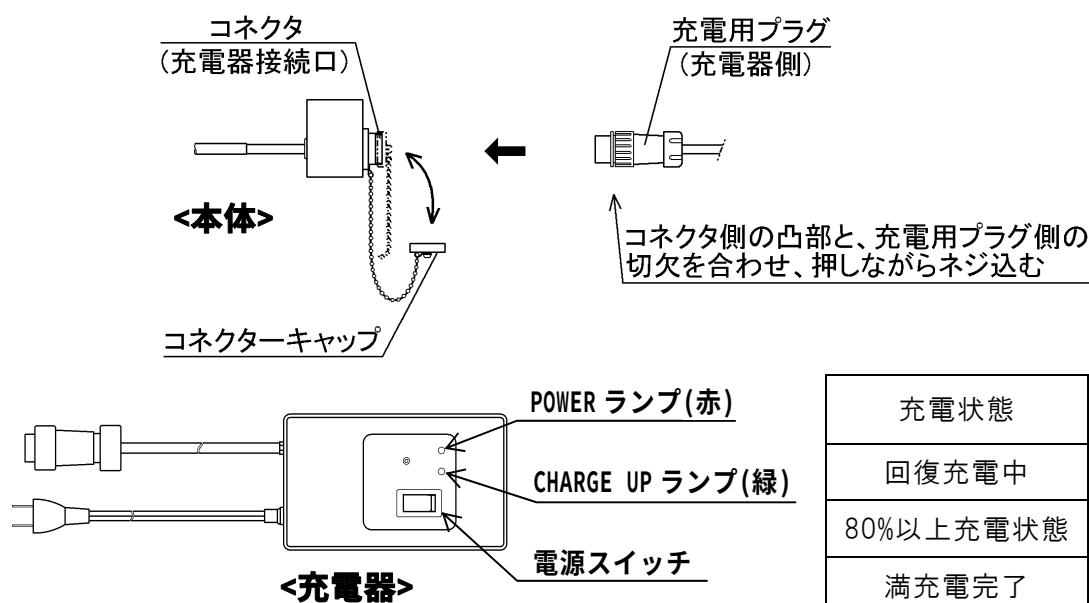

充電状態	ランプ (赤)	ランプ (緑)
回復充電中	点灯	消灯
80%以上充電状態	点灯	点灯
満充電完了	消灯	点灯

注意事項

- **ストレッチャー使用後は、必ず充電**

次回使用時に途中での充電作業が不要になります。

- **長期間使用しない場合でも、1か月に一度は充電**

バッテリーは自然放電をしますので使用しない場合でも充電が必要です。

- **乾燥した場所で充電及び保管**

漏電等を避けるため、浴室や湿気の多い場所で充電しないでください。

使用後は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いて、乾燥した場所に保管してください。

- **充電は満充電完了まで行うこと**

充電が不十分だとバッテリーの寿命が短くなりますので、POWER ランプ消灯まで行ってください。

POWER ランプ消灯後は必ず充電器を外してください。

- **充電中は足元に注意**

足をコードに引掛けると転んでけがをしたり、機器を損傷する恐れがあります。

- **充電中はストレッチャーを動かさない**

キャスターを必ずロックしてください。

動かすと、コードが切れたり、充電器が落下し、機器を損傷する恐れがあります。

- **充電中は充電器の表面温度に注意**

充電中は表面が 50℃位まであがりますので、やけどに注意してください。

- **付属の専用充電器以外は使用しないこと**

バッテリーの充電性能や寿命に悪影響を与える恐れがあります。

- **差込プラグを抜くときはプラグを持って抜く**

コードを引っ張って抜くと断線し、感電やショートを起こし発火することがあります。